

## X-DRS VET Smart

Die Komplettröntgenanlage für Ihre Kleintierpraxis und -klinik  
mit einzigartigem Installationskonzept



# Kompaktanlage für brillante Röntgenbilder

## Komplettströntgensystem für Tierarztpraxen oder Kleintierkliniken

Die X-DRS VET Smart erstellt hochwertige digitale Röntgenaufnahmen bei gleichzeitig hohem Komfort für den Anwender.


Das Röntgensystem integriert sämtliche Komponenten, die zur Erstellung von Röntgenaufnahmen benötigt werden, in einer kompakten Anlage. Über den All-in-One PC steuern Sie den gesamten Röntgenprozess, ohne das Tier aus den Augen zu verlieren.

Der EXAMION Detektor X-DR XL erstellt dank veterinärspezifischer Bildprozessierung durch die Software X-AQS qualitativ brillante Röntgenbilder, die eine eindeutige Diagnose zulassen.

## Einzigartiges Installationskonzept

Das Modul aus Generator und Röntgenstrahler kommt vorgefertigt, kalibriert und getestet in Ihre Praxis und wird dann vor Ort mit dem Tisch komplettiert.

- Schnelle und sichere Installation der Anlage
- Die Anlage ist in kurzer Zeit betriebsbereit
- Kein Stillstand Ihrer Praxis während der Installation

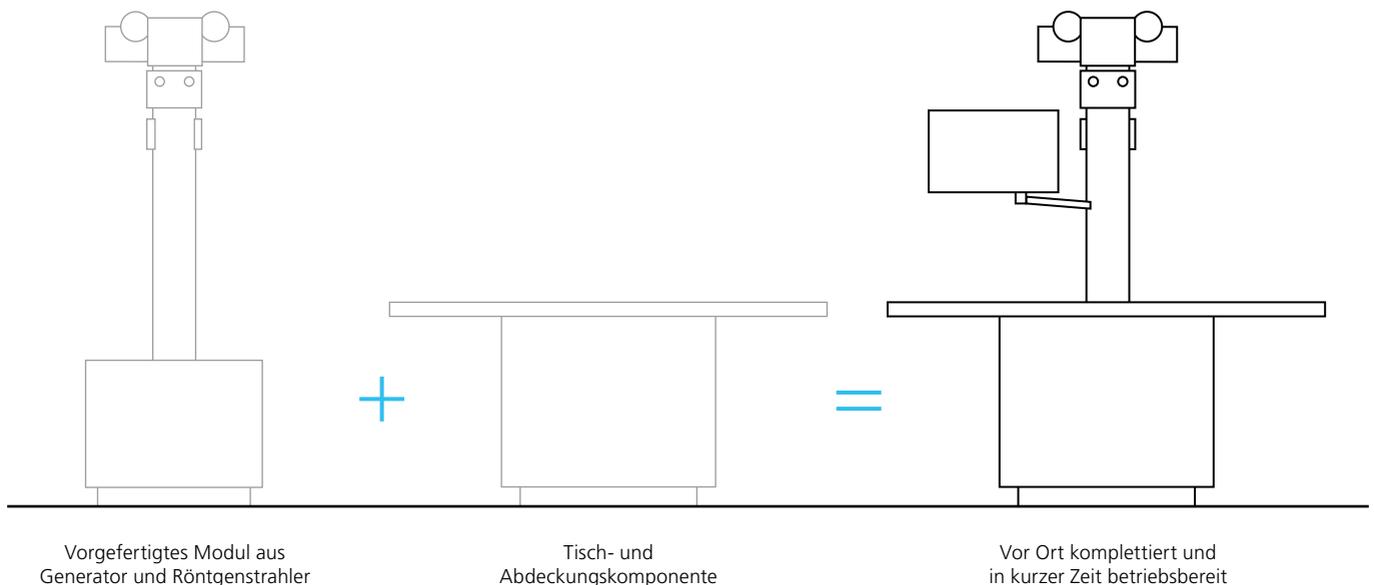

Röntgenstrahler auch für hohe Aufnahmezahlen

All-in-One PC mit 24-Zoll Monitor



Flexibler Monitorarm

Große, schwimmende Tischplatte  
Maße (L x B x H)  
1.600 mm x 640 mm x 780 mm

Modularer Aufbau für schnelle Installation

**EXAMION®**  
X-DRS VET Smart

X-DR XL Detektor  
(Format 43 cm x 43 cm)  
für hochauflösende Röntgenbilder

Hochleistungsgenerator  
mit 32 kW

Steckdosentauglich



# Ihre Vorteile auf einen Blick

Die X-DRS VET Smart stellt ein sicheres und komfortables Handling beim Aufnehmen von Röntgenbildern sicher.

## ☑ Leistungsstark

Ausreichend Leistung auch für große Tiere und hohe Aufnahmezahlen:

- Echte 32 kW über den gesamten Spannungsbereich
- Röntngengenerator und Röntgenstrahler sind für hohe Aufnahmezahlen ausgelegt und bieten Ihnen Leistungsreserven für die Zukunft

## ☑ Optimale Bedienung für den Anwender

Bedienen Sie die Anlage, wo auch immer Sie sich befinden:

- Betätigung des Pedals für die Tischbremse auch von der Seite
- Anbringung des Steuerungsrechners bei der Installation wahlweise links oder rechts
- Flexible Drehung des Steuerungsrechners in die für die Untersuchung optimale Position
- Intuitive Bedienung der Software mit nur wenigen Klicks

## ☑ Optimale Lagerung für das Tier

Bringen Sie das Tier schnell und sicher in die richtige Position:

- Leichtgängige schwimmende Tischplatte mit longitudinaler und transversaler Verschiebung
- Bremsen der Tischplatte ohne störende Geräusche für das Tier

## ☑ Die Bildqualität ist das Maß aller Dinge

Höchste Bildqualität bei geringer Strahlenbelastung für den Anwender:


- Optimierte Niedrigdosis-Belichtungswerte pro Tier und Organ
- Optimierte Bildprozessierung für alle Organe
- Anpassbarer Organbaum

Alles aus einer Hand!



# Unsere Software: intuitiv, zukunftssicher, modular

## EXAMION X-AQS

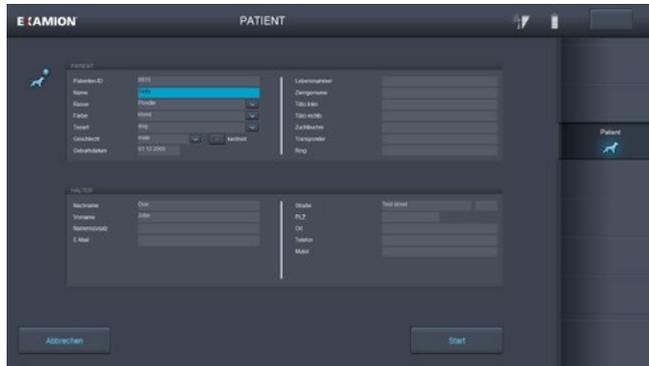


Verwaltung von Tier- und Halterdaten. Problemlose Anbindung an Praxisverwaltungssysteme über alle gängigen Standardschnittstellen.




Übersichtlicher Organbaum für den Veterinärmediziner.




Gemeinsame Steuerung von Röntgengenerator und Detektor. Optimale Belichtungswerte für jede Aufnahme.

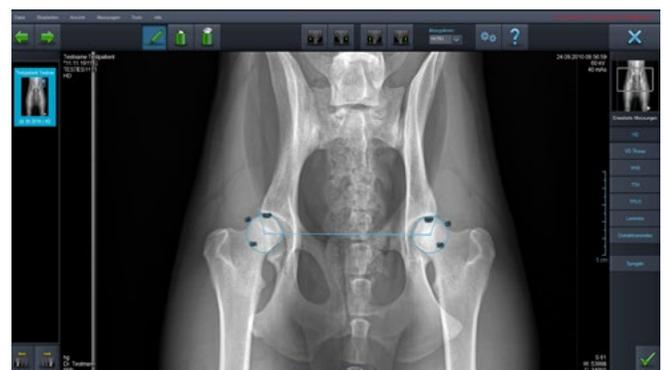

Radiologischer Viewer mit integrierten veterinärspezifischen Messfunktionen.

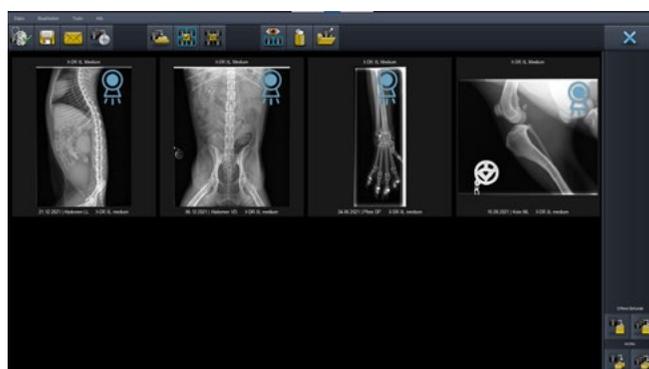

Integriertes, mitwachsendes Bildarchiv. Flexible Exportmöglichkeiten, beispielsweise per Datenträger, per Mail oder über die Cloud.

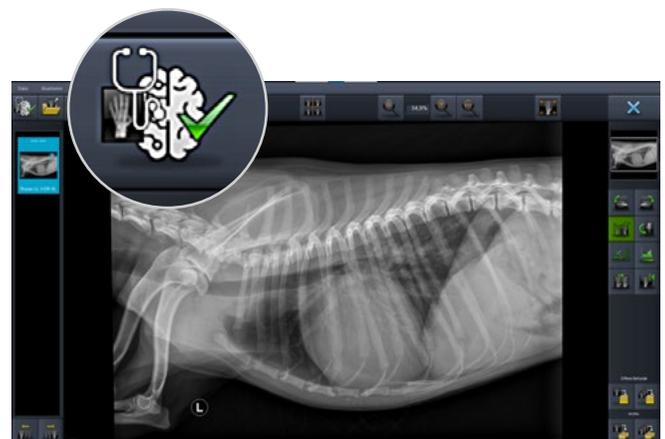

Integrierte Schnittstelle X-AI Integrator: Erhalten Sie über Künstliche Intelligenz sekundenschnell eine Zweitmeinungen für Ihre Röntgenbilder.

# Die EXAMION GmbH

EXAMION ist ein weltweit agierender Anbieter von Lösungen für die digitale Radiografie in der Human- und Veterinärmedizin. Seit inzwischen 35 Jahren arbeiten wir nach dem Prinzip „Alles aus einer Hand“ und stehen unseren Kunden als kompetenter Ansprechpartner bei Planung, Installation und After Sales Services zur Seite.



Unsere Beratung zu technischen und kaufmännischen Fragen erfolgt immer auf Basis der jeweiligen Kundenanforderung sowie Praxisräumlichkeiten und jedes Angebot wird individuell durch unsere Fachexperten zusammengestellt.


Derzeit werden über 7.000 Systeme betreut, die hauptsächlich fest in Krankenhäusern und Arztpraxen installiert sind, teils aber auch mobil verwendet werden. Die hauseigene Software EXAMION X-AQS zur Gerätesteuerung, Bildbearbeitung, Befundung und Archivierung vereinheitlicht die Steuerung und sichert einen effizienten Workflow. Neben der Radiografie und digitalen Bildverarbeitung umfasst unser Produktportfolio die Bereiche Mammografie und Röntgentherapie.

Unsere über 150 Mitarbeiter sind deutschlandweit sowie an vier europäischen Standorten, Belgien, Polen, Portugal und der Schweiz gemeinsam für unsere Kunden tätig. Weltweit arbeiten wir mit einem stetig wachsenden Netzwerk von Service- und Vertriebspartnern zusammen.


## Von langjähriger Erfahrung profitieren



Röntgenanlagen

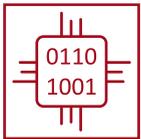

Digitalsysteme

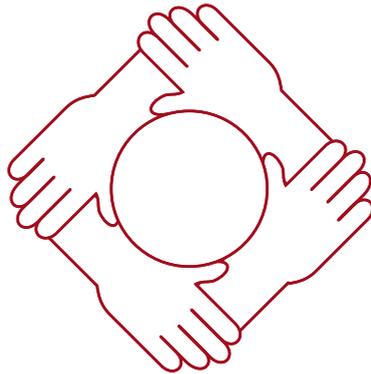

Bildarchive



Services



## Ein Kontakt – Ihr Vertriebs- und Servicepartner vor Ort

### EXAMION GmbH

Erich-Herion-Straße 37  
70736 Fellbach

Telefon: 0711 120 002-0  
Fax: 0711 120 002-22  
E-Mail: [vertrieb@examion.com](mailto:vertrieb@examion.com)  
Web: [examion.com](http://examion.com)

