

## **X**-More Dentallösungen

Speicherfolien-Systeme für dentale digitale Radiografie



Lösungen nach Maß für  
die medizinische Bildgebung



# Warum ein Dentalröntgensystem von EXAMION?

Wir bieten Röntgenlösungen sowohl für Einsteiger, die mit einigen wenigen Untersuchungen pro Woche beginnen wollen, als auch für etablierte Dentalpraxen und -kliniken mit hohem Untersuchungsaufkommen.

## Vielfältige Anwendungsfälle



Unsere Röntgenlösungen sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und bestehen aus einer Strahlenquelle sowie verschiedenen Digitalsystemen. Durch die entsprechende Wahl des Digital-systems kann das unterschiedliche Aufkommen an Dentaluntersuchungen optimal abgedeckt werden.

Die Elemente unseres Baukastens lassen sich auch mit schon in der Praxis vorhandenen Komponenten problemlos kombinieren.

## Speicherfolien-Größen

Unsere digitalen Speicherfoliensysteme bieten den Vorteil, dass sie unterschiedliche Größen an Speicherfolie verarbeiten können.

Stellen Sie sich das für Ihre Bedürfnisse passende Set an Speicherfolien zusammen und wählen Sie dann immer die für die jeweilige Aufnahme passende Foliengröße.

Verfügbare Größen

Größe 0	22 mm x 31 mm
Größe 1	24 mm x 40 mm
Größe 2	31 mm x 41 mm
Größe 3	27 mm x 54 mm
Größe 4c	48 mm x 54 mm
Größe 4	57 mm x 76 mm

## Die Röntgenanlage

### X-R Static Dental HF wall / mobile

Durch ihre flexiblen Gelenke lässt sich die Röntgenanlage einfach und schnell um das Tier herum positionieren.

Die Anlage lässt sich zudem problemlos Ihren räumlichen Gegebenheiten anpassen: Sie können zwischen einem Modell zur Wandmontage und einem Modell auf Fahrstativ wählen.

- Röntgenkopf um 395° drehbar
- Veterinärspezifische Timer-Programme



# Die Digitalsysteme

## X-CR Tabletop FireCR Dental

Das X-CR Tabletop FireCR ist das ideale Hochleistungsgerät für hohes Untersuchungsaufkommen. Es können verschiedene Dentalformate eingelesen werden. Die empfindliche Oberfläche der Dentalspeicherfolie wird dabei nicht berührt.

- Geringer Platzbedarf: Nur 12 cm breit und 32 cm tief, somit in jedem Behandlungsraum problemlos aufstellbar
- Schnelles Auslesen der verschiedenen Dentalformate: Legen Sie einfach die jeweiligen Dentalfolie auf das Eingabetablett
- Magnetische Fixierung der Dentalfolie auf dem Eingabetablett
- Kein Biegen der Folie während des Ausleseprozesses
- Keine Berührung der Folie durch Walzen
- Kein vorheriges Fixieren auf einem Adapter
- Verfügbare Speicherfoliengrößen: 0, 1, 2, 3, 4c



## X-CR More Dental Solution für Smart / Smart Pure

Die Dentallösung für X-CR Tabletop Smart und X-CR Tabletop Smart Pure ist die ideale Ergänzung, wenn Sie bereits über eines dieser Speicherfoliensysteme verfügen und mit Dentalbehandlungen neu beginnen wollen.

Gleichfalls eignet sich dieses Röntgensystem sehr gut, wenn Sie Praxisneugründer sind und ein kostengünstiges Kombinationsgerät für alle Standard-Röntgenaufnahmen sowie einige Dentaluntersuchungen pro Woche anschaffen möchten.

Die X-CR More Dental Solutions überzeugen durch ihre besonders einfache Handhabung: Sie öffnen die jeweilige Adapterkassette und fixieren dort die Dentalfolien, verschließen die Kassette wieder und lesen sie mit dem Speicherfoliensystem aus.

- Magnetische Haftung der Dentalfolien auf dem Träger der Adapterkassette
- Kein Biegen der Folie während des Ausleseprozesses
- Kein Berühren der Dentalfolien durch Walzen
- Verfügbare Speicherfoliengrößen: 0, 1, 2, 3, 4

# Die EXAMION GmbH

EXAMION ist ein weltweit agierender Anbieter von Lösungen für die digitale Radiografie in der Human- und Veterinärmedizin. Seit inzwischen 35 Jahren arbeiten wir nach dem Prinzip „Alles aus einer Hand“ und stehen unseren Kunden als kompetenter Ansprechpartner bei Planung, Installation und After Sales Services zur Seite.



Unsere Beratung zu technischen und kaufmännischen Fragen erfolgt immer auf Basis der jeweiligen Kundenanforderung sowie Praxisräumlichkeiten und jedes Angebot wird individuell durch unsere Fachexperten zusammengestellt.


Derzeit werden über 7.000 Systeme betreut, die hauptsächlich fest in Krankenhäusern und Arztpraxen installiert sind, teils aber auch mobil verwendet werden. Die hausinterne Software EXAMION X-AQS zur Gerätesteuerung, Bildbearbeitung, Befundung und Archivierung vereinheitlicht die Steuerung und sichert einen effizienten Workflow. Neben der Radiografie und digitalen Bildverarbeitung umfasst unser Produktportfolio den Bereich Mammografie.

Unsere über 150 Mitarbeiter sind deutschlandweit sowie an vier europäischen Standorten, Belgien, Polen, Portugal und der Schweiz, gemeinsam für unsere Kunden tätig. Weltweit arbeiten wir mit einem stetig wachsenden Netzwerk von Service- und Vertriebspartnern zusammen.


## Von langjähriger Erfahrung profitieren



Röntgenanlagen

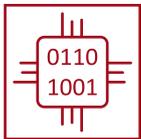

Digitalsysteme

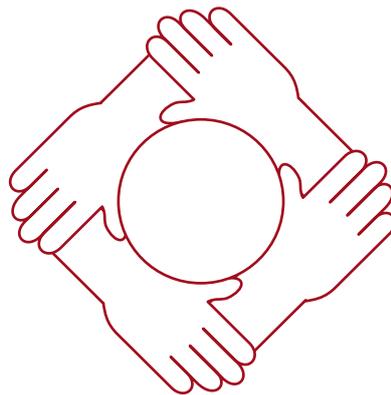

Bildarchive



Services



## Ein Kontakt – Ihre Vertriebs- und Servicepartner vor Ort

### EXAMION GmbH

Erich-Herion-Straße 37  
70736 Fellbach

Telefon: 0711 120 002-0  
Fax: 0711 120 002-22  
E-Mail: [vertrieb@examion.com](mailto:vertrieb@examion.com)  
Web: [www.examion.com](http://www.examion.com)

